


RETRACTOR de IRIS

RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE

Marca: SIDAPHARMA

Referencia: SI88000

Product Manager/Especialista: ROSA ISABEL GARCÍA

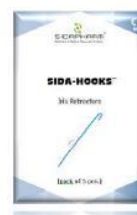

DESCRIPCIÓN

Ganchos flexibles de PMMA azul con anillo de silicona. Bordes romos para evitar el daño ocasional de la cápsula anterior del cristalino.

INDICACIONES

Permiten la sujeción del iris, aumentando y ajustando el diámetro pupilar según las necesidades del procedimiento quirúrgico a realizar.

Introducir el gancho a través de una incisión 20G hasta sobrepasar la pupila. Ajustar posteriormente el anillo hasta la dilatación deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gancho de polipropileno flexible y anillo de ajuste de silicona.
Longitud total del gancho 11mm (1mm desde la curva). Anillo de 1.2mm de diámetro y 0.3mm de altura.

CERTIFICADOS SANITARIOS

Clase Médica IIa. CE0653

PRESENTACIÓN

Caja de cartón con bandeja que contiene 5 unidades en bolsa estéril
COGIDO EAN: 18427913108774

